

Госпитальная четверка

Быстро. Удобно. Достоверно.





Быстрая постановка анализа

Готовые реагенты



Цветовая идентификация
флаконов контрольных проб

Разборные стрипы,
ломаются на лунки

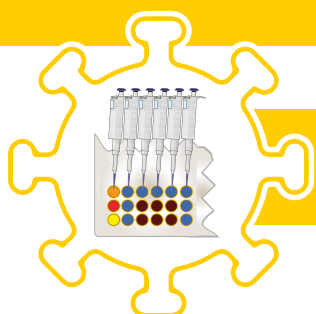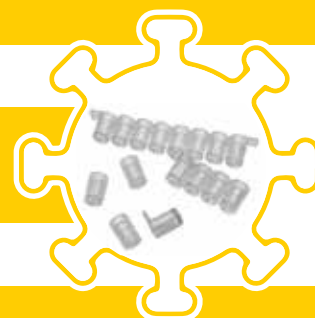


Яркая цветовая индикация
внесения образца

Диагностика Сифилиса

СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG)

Σ 96, 192, 480, **960**

- Высокоспецифичная тест-система: нет перекрестных реакций с ревматоидным фактором и антителами к *Borrelia burgdorferi*, *Trichomonas vaginalis*, Herpes Simplex Virus, *Chlamidia trachomatis*
- Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), ликвор
- Выявляет сифилис всех форм, в том числе нейросифилис
- 30 мин +37°C (с шейкированием / без шейкирования)
- **13 месяцев** - срок годности наборов (2 месяца после вскрытия)

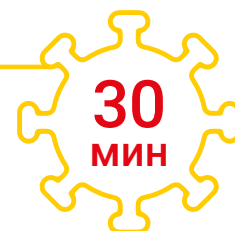

СифилисИФА-IgG

Σ 96, 192

- Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), ликвор
- Доказанная* диагностическая:
 - чувствительность - 99,7%
 - специфичность - 97,7%
- **13 месяцев** - срок годности наборов (6 месяцев после вскрытия)

СифилисИФА-IgM

Σ 96, 192

- Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), ликвор
- **13 месяцев** - срок годности наборов (6 месяцев после вскрытия)



Диагностика ВИЧ

ВичИФА-HIV-Ag/Ат-СКРИН-О

Σ 96, 192, 480, **960**

- **10 пг/мл** - аналитическая чувствительность по p24
- Определение антител (включая группу О и основные субтипы группы М) и p24 в сыворотке и плазме крови человека (**включая доноров крови**), и в препаратах крови человека
- 40+20 мин +37°C с шейкированием
- **15 месяцев** - срок годности наборов (4 месяца после вскрытия)



ВичИФА-HIV-Ag/Ат

Σ 96, 192, 480, **960**

- 25 пг/мл - аналитическая чувствительность по p24

ВичИФА-анти-HIV-1,2

Σ 96, 192

- Рекомбинантные антигены ВИЧ-1 (gp41) и ВИЧ-2 (gp36) иммобилизованы на планшете

Диагностика Гепатита В

NEW ГепатитИФА-НВsAg-скрин

▽ 96, 192, 480, **960**

0,05 МЕ/мл - аналитическая чувствительность

Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), препараты крови человека
30+30 мин +37 или 42°C с шейкированием



ГепатитИФА-НВsAg сенс

▽ 96, 192, 480, **960**

- **0,01 МЕ/мл** - аналитическая чувствительность
- Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), препараты крови человека
- 40+20 мин
+37 или +42°C с шейкированием

ГепатитИФА-НВsAg сенс подтверждающий

▽ 48

- Для **подтверждения наличия НВsAg** в сыворотке и плазме крови человека (**включая доноров крови**), и в препаратах крови человека
- **0,01 МЕ/мл** - аналитическая чувствительность

ГепатитИФА-НВsAg (кач./кол.)

▽ 96, 192

- **Количественное** определение НВsAg в сыворотке и плазме крови человека
- **0,05 МЕ/мл** - аналитическая чувствительность
- Калибраторы:
0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 МЕ/мл

ГепатитИФА-НВsAg подтверждающий

▽ 48

- Для **подтверждения наличия НВsAg** в сыворотке и плазме крови человека
- **0,05 МЕ/мл** - аналитическая чувствительность

Диагностика Гепатита С

ГепатитИФА-анти-НСV

▽ 96, 192, 480, **960**

- 100% специфичность
- Образцы: сыворотка, плазма (**включая доноров крови**), препараты крови человека
- 30+30 мин +37°C с шейкированием
- **15 месяцев** - срок годности наборов (3 месяца после вскрытия)

ГепатитИФА-анти-НСV-спектр

▽ 24, 48, 120

- Для **выявления и подтверждения** наличия иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в сыворотке и крови человека
- Стабильность окраски лунок после внесения стоп-реагента **20 мин**



ALISEI Q.S. + Госпитальная четверка

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО

Идеальное решение для автоматизации скрининга
в лабораториях инфекционного профиля

ВичИФА-HIV-
Аг/Ат-СКРИН-О

ГепатитИФА-
HBsAg-скрин

ГепатитИФА-
анти-HCV

СифилисИФА-
суммарные
антитела



240
сывороток

Единовременная загрузка
на 1 сессию


* при условии совмещения методик



до 12
тестов*

Гарантия качества инфекционного скрининга

- **Отсутствие контаминации** без одноразовых наконечников
- **2 независимые иглы с инертным покрытием** - высокая скорость дозирования и точность раскапывания
- Единый промывочный буфер
- **Индивидуальная настройка** условий инкубации для каждого планшета (КТ или +37-40°C)

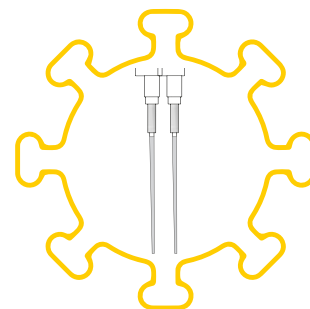

В 2026 году в лабораториях бесперебойно работают более 500 Alisei Q.S.:

- экспертные вирусологические лаборатории
- централизованные лаборатории
- центры СПИД
- КВД
- СПК



Оперативное реагирование сервисной службы и индивидуальный подход к каждому клиенту!



www.alkorbio.ru
info@alkorbio.ru

Горячая линия: 8-800-222-55-70
Тел: 8 (812) 677-87-79; 677-21-62

192148, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А

Тираж 06-2026